


## KANBARRIER LABORATUVAR TROMBOSİT LÖKOREDÜKSİYON FİLTRE



<b>Ürünler</b>	20004046520 LABORATUVAR TROMBOSİT LÖKOREDÜKSİYON FİLTRE PRP
<b>Sterilizasyon Yöntemi</b>	Gama Işınlama
<b>Raf Ömrü</b>	36 Ay
<b>Ambalaj Şekli</b>	Şeffaf pakette tekli ambalaj Kolide 25 adet
<b>Ürün Açıklaması</b>	Laboratuar tipi trombosit saklama torbası, saklama torbasının ucundaki hortuma üstten bağlı trombosit filtresi ve filtre toplama hortumu, hortum üzerine bir agregat filtresi ve çividen oluşmaktadır. Torbada toplanan havanın atılması için bypass hattı bulunmaktadır.
<b>Kullanım Amacı/Endikasyonu</b>	4-6 adet "Random" veya bir terapötik doz Trombosit Süspansiyonu lökositini indirmek için kullanılır.
<b>Performansı</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4-6 ünite Trombosit içindir.</li> <li>Filtrasyon sonrası yüksek oranda trombosit kazanımı: &gt;%90</li> <li>Filtredeki ürün kaybı : &lt; %10</li> <li>Yüksek verimli filtre sayesinde geri kalan indirgenmiş lökosit miktarı: &lt;1x10<sup>6</sup></li> </ul>

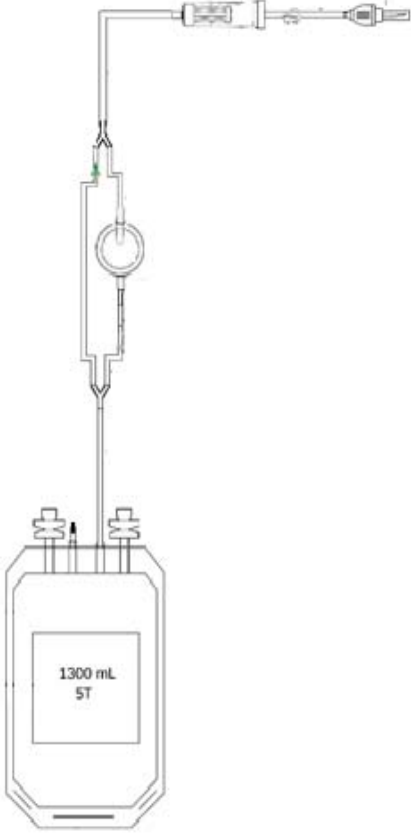

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Kansuk Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yassören Mahallesi Fırat Sk. No:14/1 Arnavutköy-İstanbul/Türkiye

Phone: +90 212 5921576 Fax: +90 212 5803772 Web: [www.kansuk.com](http://www.kansuk.com) E-mail: [kansuk@kansuk.com](mailto:kansuk@kansuk.com)

